



Yıkama şartlarını görün.
Prosesi doğrulayın.
Kayıtları izleyin.

Normal ve kontamine hastane tekstilleri için tanımlanan yıkama koşullarının uygulanıp uygulanmadığını kayıtlarla inceleyin.



AYRIŞTIRMA



DOĞRULAMA




İZLENEBİLİRLİK

GENEL BAKIŞ

Yıkandı bilgisinden proses doğrulamasına

VisionCore; hastane tekstillerinde tanımlanan yıkama koşullarının uygulanıp uygulanmadığını kayıtlarla görünür hale getirir.

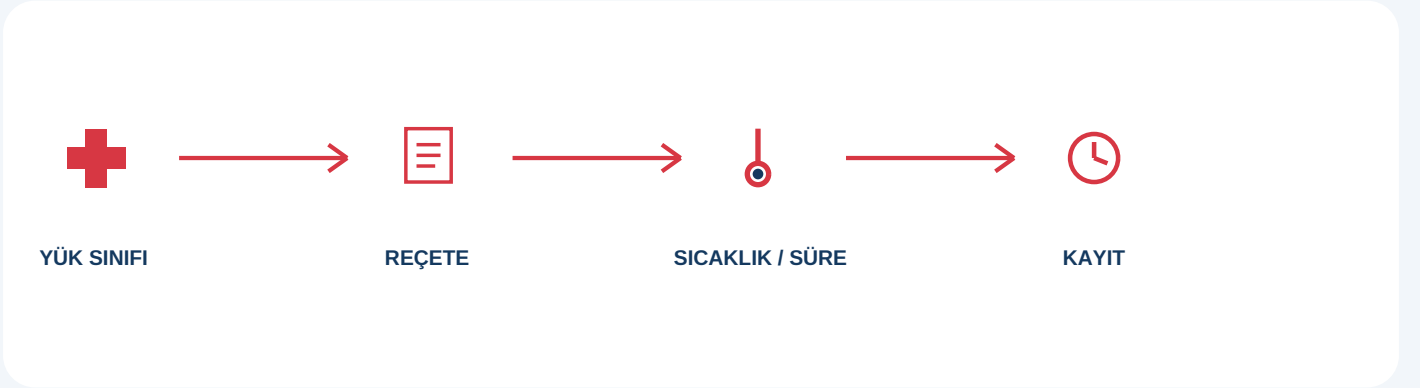

Yük sınıfı / kaynak

Normal, kontamine veya tanımlı diğer yükleri kaynak ve kategori bilgisiyle birlikte izleyin.



Reçete ve proses şartı

Doğru makine, doğru reçete, sıcaklık, süre ve proses adımlarını birlikte değerlendirin.



Kimyasal adımlar

Kayıtlı doz ve kimyasal adımların ilgili reçete bağlamında gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyin.



Kayıt ve izlenebilirlik

Departman, yük, makine, reçete ve zaman bilgisini geriye dönük bulun.

Amaç

Kurumun tanımladığı yıkama prosesinin gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kayıtlarla görün.

KİRLİ KABUL & AYRIŞTIRMA

Doğru yük doğru prosese girmeli

Normal hastane tekstili ile kan veya vücut sıvılarıyla kirlenmiş tekstilin doğru kategori, kaynak ve reçeteye ilişkilendirilmesi kritik bir ilk adımdır.

**Normal hastane tekstili**

Servis, oda ve tanımlanan diğer kaynaklardan gelen standart yükler.

**Kan / vücut sıvısı ile kirlenmiş tekstil**

Ameliyathane veya tanımlı kontamine yüklerin doğru kategori ve reçeteye yönlendirilmesi.

**Kaynak / departman**

Servis, ameliyathane ve tanımlanan diğer kaynaklardan gelen yükleri ayrı izleyin.

**Yük sınıfı**

Normal ve kontamine olarak tanımlanan yüklerin doğru sınıfta ilerlediğini kontrol edin.

**Doğru reçete**

Yük sınıfına ve tesis prosedürüne göre tanımlanan reçetenin uygulandığını doğrulayın.

**İzlenebilir başlangıç**

Yükün kaynağını, zamanını, makineyi ve reçeteyi ilk kayıttan itibaren ilişkilendirin.

Temel soru

Bu yük doğru sınıfta mı ve doğru yıkama prosesine mi yönlendirildi?

SICAKLIK & SÜRE DOĞRULAMA


İstenen sıcaklıkta, istenen süre boyunca yıkandı mı?

Sıcaklık eğrisini reçete operasyonları ve zaman bilgisiyle birlikte okuyun; hedefe ulaşma ve hedefte kalma davranışını kayıtlardan inceleyin.



Departman / makine /
reçete

SICAKLIK GRAFİĞİ

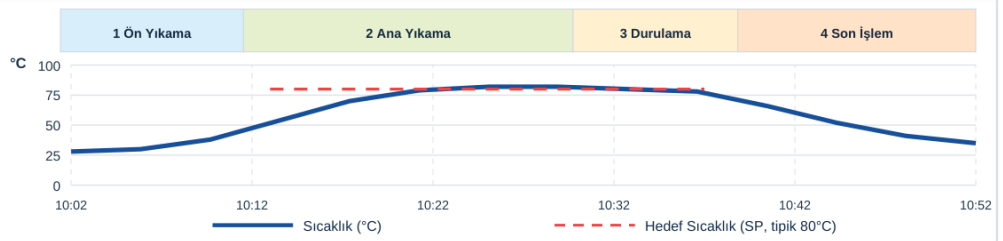

Hedef sıcaklık

Reçetede tanımlanan hedef sıcaklığı ve prosesin ulaştığı gerçek değeri birlikte görün.



Gerekli süre

Tanımlı sıcaklık koşulunun gereken süre boyunca korunup korunmadığını zaman kaydıyla inceleyin.



Gerçek eğri

Isıtma, yıkama ve soğuma boyunca oluşan gerçek sıcaklık davranışını görüntüleyin.



Operasyon bağlamı

Sıcaklık değişimini ilgili operasyon ve komutla birlikte değerlendirin.

Temel soru

Hedef sıcaklığa ulaşıldı mı ve gereken süre boyunca şart korunabildi mi?

KİMYASAL & PROSES ADIMLARI

Doğru kimyasal adımlar doğru şartlarda gerçekleşti mi?

Kayıtlı kimyasal dozlarını, su alma, ısıtma, yıkama, durulama ve tahliye adımlarıyla aynı reçete zaman çizelgesinde inceleyin.

SU ALMA

ISITMA

KİMYASAL

YIKAMA

DURULAMA

TAHLİYE

Tanımlı proses adımlarının sırası, süresi ve kayıtlı doz bilgileri birlikte incelenir.



Kimyasal seçimi

Reçetede tanımlanan kimyasal adımların ilgili proseste yer aldığını kontrol edin.



Doz kayıtları

Mevcut doz kayıtlarını miktar, zaman ve reçete bağlamında inceleyin.



Proses sırası

Su alma, ısıtma, yıkama, durulama ve tahliye adımlarının beklenen sırada ilerlediğini görün.



Alarm / müdahale

Alarm veya manuel müdahale varsa prosesin hangi aşamasında oluştuğunu bulun.


Doğrulama

Yalnız reçete adını değil; o reçetenin gerçekten nasıl çalıştığını kayıtlarla değerlendirin.

REÇETE DETAYI

Yıkama nasıl gerçekleşti?

Operasyon, komut, sıcaklık, su ve devir grafiklerini aynı zaman ekseninde okuyarak prosesin gerçek davranışını görün.

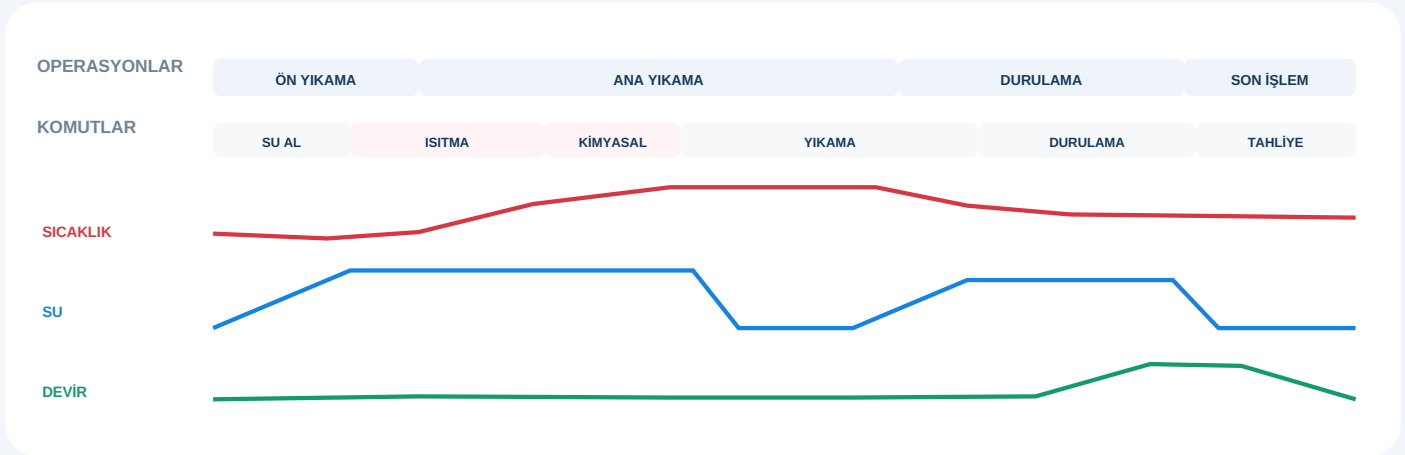

Operasyon / komut

Reçetenin hangi adımlarla ve hangi sürelerle çalıştığını ayrıntılı inceleyin.



Sıcaklık / su / devir

Proses eğrilerini ilgili komutlarla aynı ekseninde değerlendirin.



Kimyasal / alarm

Kimyasal kayıtlarını, alarmları ve operatör olaylarını aynı reçeteye bağlayın.



Raporlanabilir detay

Bitmiş reçeteyi daha sonra aynı operasyon ve proses kayıtlarıyla yeniden inceleyin.


Yıkandı mı, doğru şartlarda mı?

VisionCore bu soruya proses kayıtlarıyla yaklaşır; uygulanan adımların ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini görünür kılar.

DEPARTMAN & YÜK İZLENEBİLİRLİĞİ

Yükün hikâyesini geriye doğru bulun

Departman, yük sınıfı, makine, reçete ve zaman bilgisini ortak bir izleme zincirinde değerlendirin.

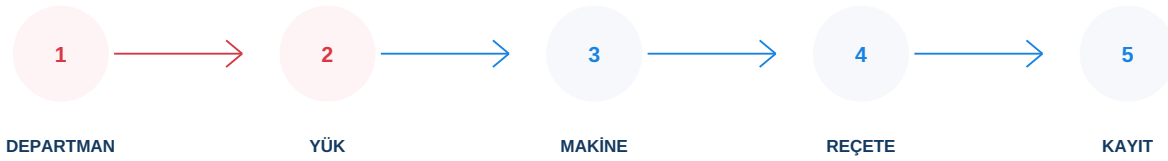

Departman / kaynak

Servis, ameliyathane veya tanımlı diğer kaynakları yük kaydıyla ilişkilendirin.



Makine / reçete

Yükün hangi makinede ve hangi reçeteyle işlendiğini bulun.



Başlangıç / bitiş

Yıkamanın ne zaman başladığını, ne zaman tamamlandığını ve toplam süreyi görün.



Geçmiş inceleme

Belirli bir yükü veya dönemi geçmiş kayıtlardan yeniden açıp inceleyin.

İzlenebilirlik

Departman -> yük -> makine -> reçete -> proses kaydı zincirini geriye dönük takip edin.

PERFORMANS & TÜKETİM

Kaynak kullanımını proses şartlarıyla birlikte değerlendirin

Su, buhar, elektrik ve kimyasal kullanımını toplam yük ve reçete davranışıyla birlikte okuyun.

**1.350 Lt**

SU

**4,8 kg**

BUHAR

**12,6 kWh**

ELEKTRİK

**Kayıtlı**

KİMYASAL



Yük başına tüketim

Kaynak kullanımını toplam yükle birlikte değerlendirin; yalnız toplam değere bakmayın.



Makine karşılaştırması

Aynı makine tipinde ve benzer proseslerde tüketim farklarını karşılaştırın.



Dönem takibi

Vardiya, gün veya hafta bazında üretim ve tüketim davranışını birlikte izleyin.



Proses şartını koruyun

Tüketim değerlendirmesini yıkama şartlarından bağımsız değil, reçete bağlamında yapın.

Ölçülebilir değerlendirme

Düşük tüketim mi, düşük üretim mi? Kaynak kullanımını yıkama koşulları ve yükle birlikte okuyun.

MAKİNE SAĞLIĞI & ERKEN TESPİT

Kritik makine davranışındaki değişimi erken görün

Isıtma, yüksek devirli sıkma, komut süreleri ve alarm davranışlarındaki sapmaları geçmiş çalışma karakteristiğiyle birlikte değerlendirin.

Makine davranışındaki değişimi erken görün

Isıtma, yüksek devirli sıkma, komut süreleri ve alarm davranışlarındaki sapmaları geçmiş kayıtlarla birlikte değerlendirin.

BEKLENMEYEN DURUŞLAR OPERASYONU ETKİLER



Isıtma davranışı

Aynı hedefe ulaşma sürelerindeki değişimi takip edin ve olağandışı döngüleri inceleyin.



Yüksek devirli sıkma

Sıkma performansı ve yüksek devir davranışındaki sapmaları teknik inceleme için görünür kılın.



Alarm geçmişi

Tekrarlayan alarmları ilgili reçete ve proses aşamasıyla birlikte değerlendirin.



Bakım bağlantısı

Sağlık bulgularını bakım geçmişi ve teknik inceleme ile birlikte ele alın.

Operasyon sürekliliği

Beklenmeyen duruşlar yalnız makineyi değil, hastane çamaşırhanesinin hizmet sürekliliğini de etkileyebilir.

TEKNİK DANIŞMANLIK

Veriyi kurum prosedürü ve saha tecrübesiyle birlikte okuyun

VisionCore proses kayıtlarını görünür kılar; teknik ve operasyonel değerlendirme, kurumun tanımlı prosedürleri ve saha incelemesiyle birlikte yapılır.

Kayıt + proses bilgisi + saha tecrübesi

VisionCore verilerini kurum prosedürleri, makine davranışı ve teknik incelemeyle birlikte değerlendirin.



Proses danışmanlığı

Sıcaklık, süre, su, kimyasal ve reçete adımlarını birlikte değerlendirerek iyileştirme alanlarını bulun.



Makine teknik desteği

Mekanik, elektrik, otomasyon, ısıtma ve sıkma davranışlarını kayıtlarla destekleyin.



Bakım / modernizasyon

Sağlık bulgularını bakım geçmişi ve modernizasyon ihtiyaçlarıyla birlikte ele alın.



Raporlama

İnceleme ve toplantılarda kullanılabilecek geçmiş proses kayıtlarını ve raporları saklayın.

Önemli sınır

VisionCore hijyen veya mikrobiyolojik sonucu garanti etmez. Uygulanan prosesin nasıl, ne zaman ve hangi kayıtlı şartlarda gerçekleştiğini görünür kılar.